

動脈留置針固定パッチ

A-ナマランちび[®]


NAMARAN

Material：シリコンエラストマー


Cat.No.：AN04

Spec


幅：15.0mm
長さ：30.0mm
厚さ：7.28mm
重さ：1.3g
角度：12.5°

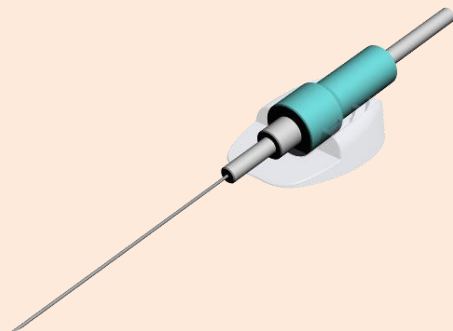

- 直接肌にフィットし、皮膚固定用テープを用いることで安定した固定が可能です。
- シリコンエラストマーを原料とし、たんぱく質を含んでおらずアレルギーを起こしません。体にやさしい素材です。
- 素材にはゴム弾性があるので留置針がA-ナマランちびに密着します。
- A-ナマランちびを用いて、留置針を適切な角度に保つことができます。

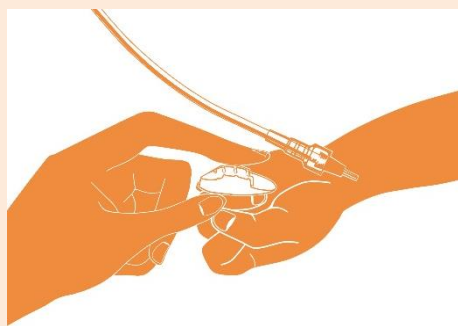

A-ナマランちびの挿入

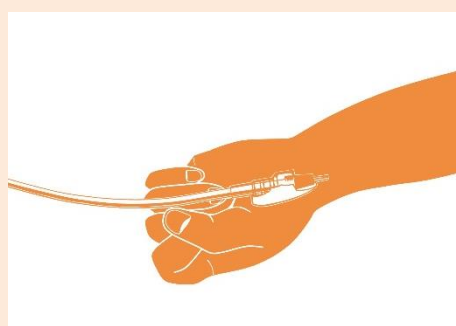

留置針のA-ナマランちびへの密着

〈取扱総代理店〉

 **ジェイメディカル株式会社**


新潟県新潟市東区紫竹卸新町1808-22
TEL:025-272-3311 FAX:025-272-3321
専用ダイヤル:025-272-3855
専用メールアドレス:a-namaran@jeimedical.com

〈製造販売元〉

 **JMR株式会社**

新潟県新潟市西蒲区大原641
TEL:0256-77-8808 FAX:0256-77-8809
E-mail:info@jmr-lab.com
製造販売業許可:15B1X10003

〈製造元〉

 **サンアロー化成株式会社**
第一工場

新潟県佐渡市栗野江1550番地
TEL:0259-66-4100 FAX:0259-66-3124
製造業許可:15BZ200025
第一工場 ISO13485認証取得
登録番号:JQA-MD0094
登録活動範囲:カテーテル固定用パッチの製造