




JMR株式会社

日本の匠の技術の世界へ
医療現場の声をカタチにします

医療現場の「こんな欲しい」にお応えします

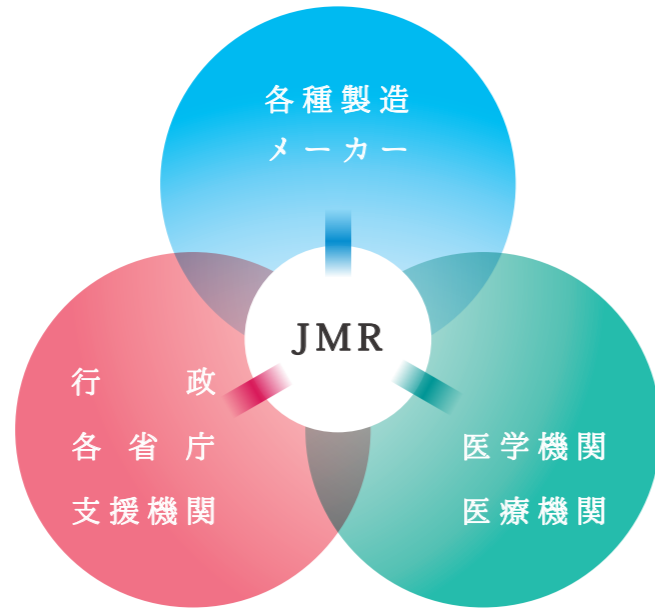

- ・ 医療機器製造販売
- ・ OEM
- ・ 医療コンサルティング
- ・ 医療ビジネスコーディネート

医学・医療機関や行政・各省庁との連携した開発だけでなく、
技術を持った各種製造メーカーの医療分野参入への橋渡しとして「医学機関とメーカー」「行政・各省庁とメーカー」など、医療機器・福祉機器の開発に携わる企業や人を的確につなぎ、スムーズな流れをつくります。

医療における「こんな欲しい」を形にし、医師にも病气と闘う患者にもやさしい医療機器・福祉機器を提供していきます。

お問合せ

製品の詳細情報や、サンプル品の請求などがありましたら、弊社営業担当、または左記窓口までお気軽にお問い合わせください。

※製品の仕様などは予告なく変更する可能性があります

FAX 0256-77-8809
MAIL info@jmr-lab.com
URL http://jmr-lab.co.jp

CONTACT




http://jmr-lab.co.jp



JMR株式会社

〈Aスタジオ〉
〒959-0511 新潟県新潟市西蒲区大原641
TEL: 0256-78-7176 FAX: 0256-86-1461
医療機器製造販売業 許可番号: 15B3X10005


〈Bスタジオ〉
〒953-0054 新潟県新潟市西蒲区漆山8460-1
TEL: 0256-77-8808 FAX: 0256-77-8809
高度管理医療機器等販売業及び賃貸業 許可番号: 新市第 835 号
医療機器製造業登録番号: 15BZ200029
医療機器修理業許可番号: 15BS200093

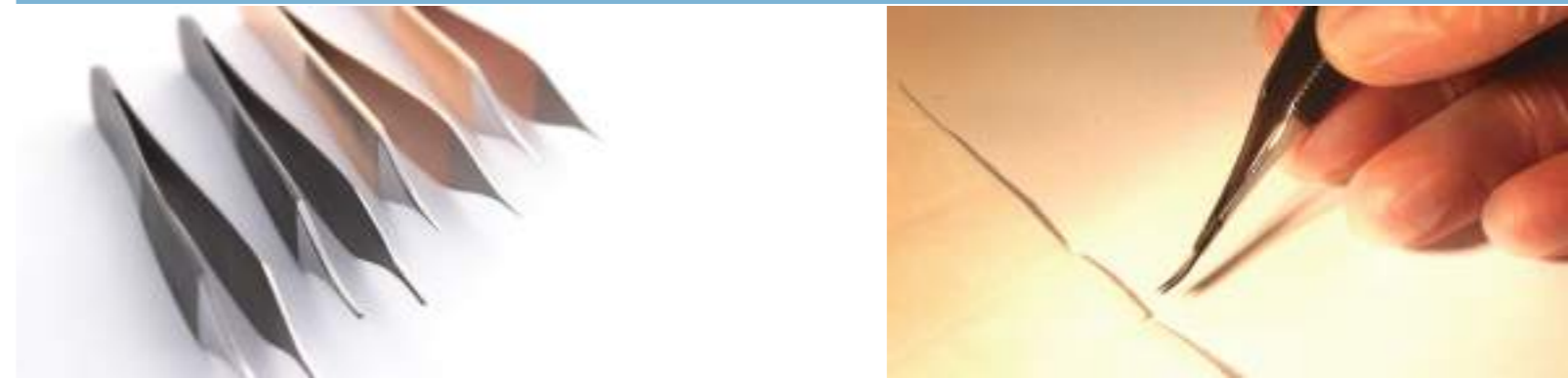

MEDICAL SOLUTION

Tissue Forceps

鑷子

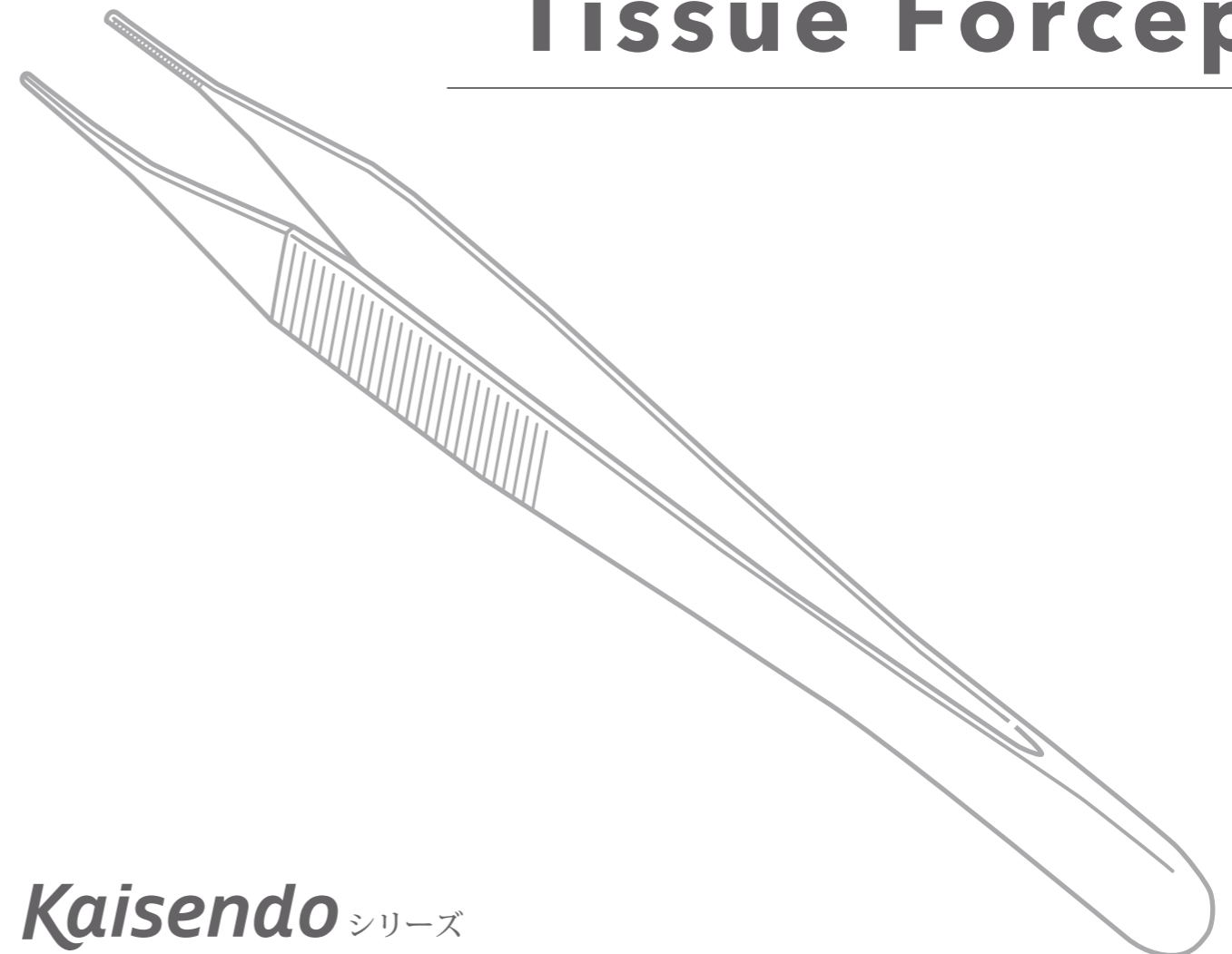

Kaisendo シリーズ

鑷子シリーズの特徴

SERIES LINEUP



ダイヤモンドダスト加工



ダイヤモンドダスト

Diamond dust **PINK GOLD**

先端にダイヤモンドダストを散りばめた表面加工を施しています。8-0 から 10-0 の縫合糸への使用に適します。

スタンダード

Standard **J-GRAY**

特殊加工のないスタンダードタイプ。

熱硬化性樹脂カラーリング (全 11 色)

各種鋼製小物のスタンダードタイプは「柄の部分のみ」熱硬化樹脂のカラーリングを行うことができます。外科用鑷子、アドソン鑷子など多くの器具を管理する手術室や中央材料室で「診療科別」「術式セット別」などを色で識別することができ便利です。



鑷子シリーズの区分・選び方

HOW TO SELECT

一般外科 / 微小外科

SURGERY

- 一般外科用 (全 27 種類)、マイクロサージェリー用 (全 6 種類) のラインナップがあります。
- マイクロサージェリー用は、直径 2mm 前後の血管の外膜や神経、縫合針 / 縫合糸の把持に使用します。また眼科医の方が眼部の組織、縫合針 / 縫合糸の把持に使用します。

有鉤 / 無鉤

HOOK

- 先端部に「鉤 (= かぎ状の突起)」がある鑷子が「有鉤」、ない鑷子が「無鉤」です。鉤の有無により把みややすさなどが異なるため、用途に合わせ使い分けれます。



有鉤

主に組織を把持する際に使用します。突起を利用し、滑らずに組織を把持します。



無鉤

突起部分がないスタンダードタイプ。主に縫合針や縫合糸、組織の把持に使用します。

PH (プラットフォーム)

PLATFORM



- 先端に PH (プラットフォーム) が付いた鑷子は、通常の鑷子より把持力がアップします。
- TP-019、TP-020、TP-024、TP-025 の 4 種が PH 付です。

PH (プラットフォーム) ※写真は TP-020

一般外科用鑷子

	品名	全長	有鉤	特徴	注文番号
 TP-001	マッカンドーピンセット	15.5cm	—	—	TP-001
			○	—	TP-002
 TP-003	アドソンピンセット	12cm	—	—	TP-003
			○	—	TP-004
 TP-005		15cm	—	—	TP-005
			○	—	TP-006
 TP-007	アドソンマイクロピンセット	12cm	—	—	TP-007
			○	—	TP-008
 TP-009	形成異物ピンセット	13cm	—	—	TP-009
	コークピンセット	15.5cm	—	—	TP-010
 TP-011	ジェラルドピンセット	17cm	○	直型	TP-011
			○	曲型	TP-012
 TP-018	形成デリケートピンセット	11.5cm	—	—	TP-017
			○	—	TP-018
 TP-019	形成スーパーデリケートピンセット	11.5cm	—	PH 付	TP-019
			○	PH 付	TP-020
 TP-021	D/D マイクロアドソンピンセット	12cm	—	先端φ0.2mm	TP-021
			—	先端φ0.1mm	TP-022
 TP-023		15cm	—	先端φ0.3mm	TP-023
			 TP-024	16cm	—
 TP-025	D/D マイクロピンセット	18.5cm			○
			 TP-026		—
 TP-027	鋭匙ピンセット	13cm			
			 TP-028	コーク型ピンセット	15.5cm
 TP-029		—			
			 TP-030	アドソンフックピンセット	12.5cm
 TP-031	フックピンセット	12.5cm			

マイクロサージェリー用鑷子

※マイクロサージェリー用鑷子は、全て無鉤

 TP-015	精密ピンセット	11cm	No.4 : TP-013 / No.5 : TP-014
		10.5cm	先端φ0.2mm : TP-015 / 先端φ0.3mm : TP-016
 TP-032	マイクロ鑷子	11cm	先端φ0.3mm・直型
			先端φ0.3mm・曲型 45°