




JMR株式会社

日本の匠の技術の世界へ  
医療現場の声をカタチにします

医療現場の「こんな欲しい」にお応えします

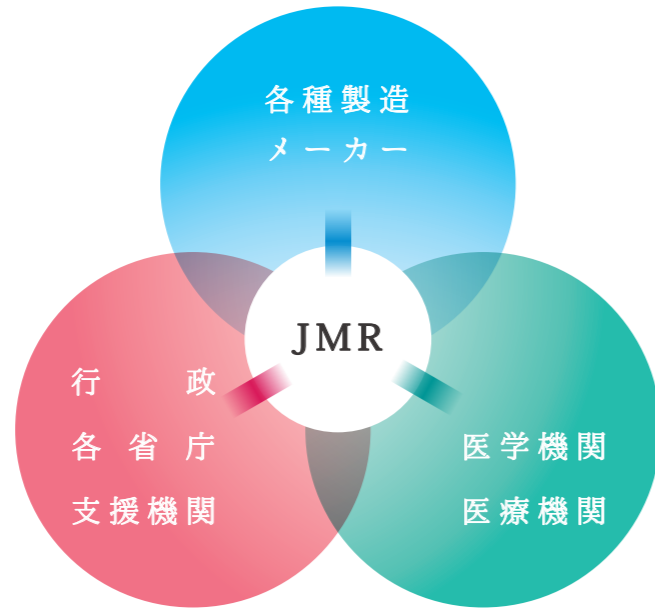

- ・医療機器製造販売
- ・OEM
- ・医療コンサルティング
- ・医療ビジネスコーディネート

医学・医療機関や行政・各省庁との連携した開発だけでなく、技術を持った各種製造メーカーの医療分野参入への橋渡しとして「医学機関とメーカー」「行政・各省庁とメーカー」など、医療機器・福祉機器の開発に携わる企業や人を的確につなぎ、スムーズな流れをつくります。

医療における「こんな欲しい」を形にし、医師にも病气と闘う患者にもやさしい医療機器・福祉機器を提供していきます。

### お問い合わせ

製品の詳細情報や、サンプル品の請求などがありましたら、弊社営業担当、または左記窓口までお気軽にお問い合わせください。

※製品の仕様などは予告なく変更する可能性があります

FAX 0256-77-8809  
MAIL info@jmr-lab.com  
URL http://jmr-lab.co.jp

### CONTACT



http://jmr-lab.co.jp



JMR株式会社

〈Aスタジオ〉  
〒959-0511 新潟県新潟市西蒲区大原641  
TEL: 0256-78-7176 FAX: 0256-86-1461  
医療機器製造販売業 許可番号: 15B3X10005


〈Bスタジオ〉  
〒953-0054 新潟県新潟市西蒲区漆山8460-1  
TEL: 0256-77-8808 FAX: 0256-77-8809  
高度管理医療機器等販売業及び賃貸業 許可番号: 新市第 835 号  
医療機器製造業登録番号: 15BZ200029  
医療機器修理業許可番号: 15BS200093



MEDICAL SOLUTION

# Scissors

剪刀

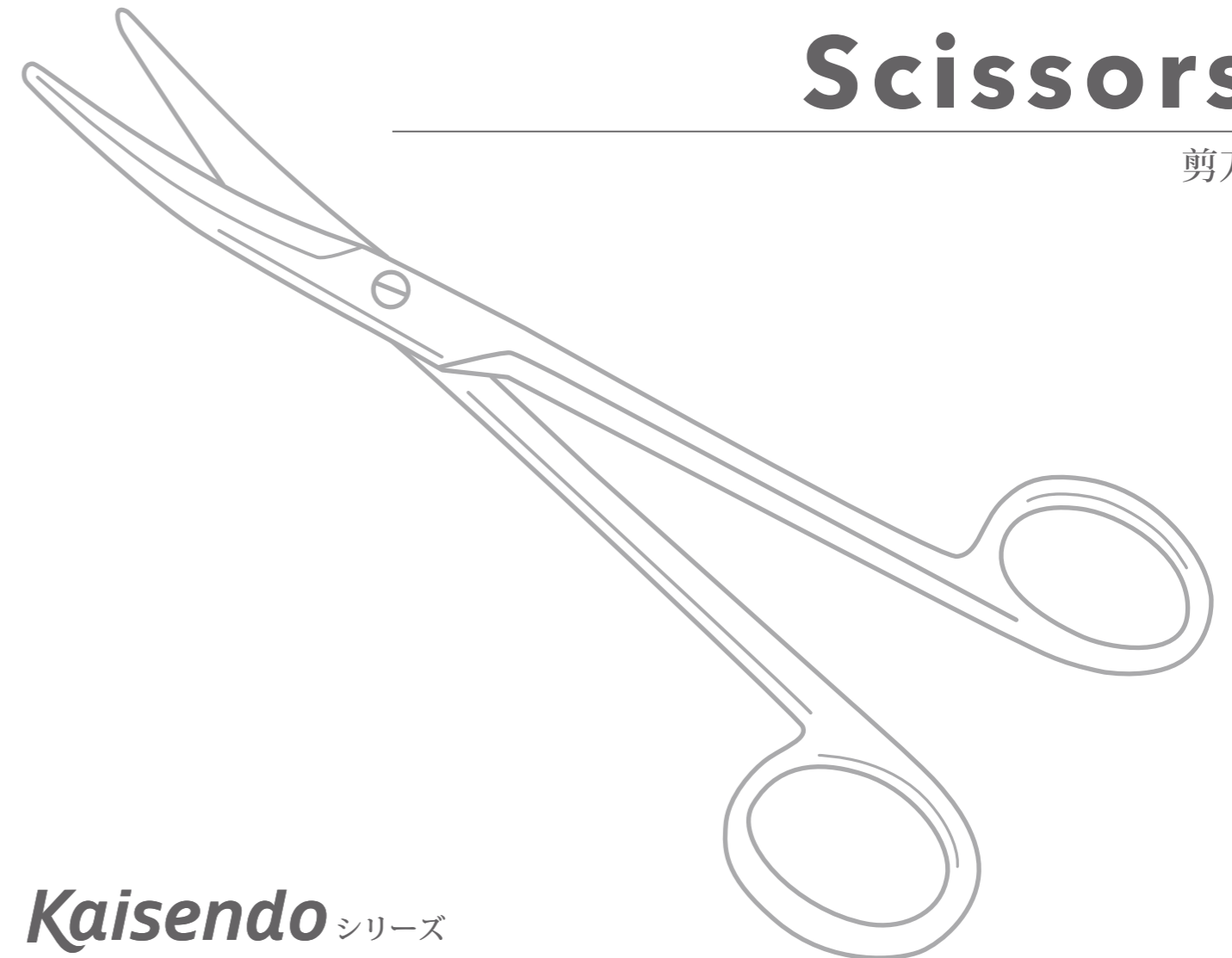

Kaisendo シリーズ

# JMR かいせん堂シリーズ 剪刀

## Kaisendo Series Scissors

### 剪刀シリーズの特徴



#### スーパーカット

Supercut

**Z-BLACK**

片側の刃先をギザ刃にすることにより、滑りやすい組織を逃さずカットします。



#### スーパーカット + 超硬

Supercut + carbide

**PINK GOLD**

片側のギザ刃に加え、耐摩耗性に優れた超硬材を先端に使用しています。



#### スタンダード

Standard

**J-GRAY**

スタンダードな製品はグレー色です。

#### 熱硬化性樹脂カラーリング (全 11 色)

各種鋼製小物のスタンダードタイプは「柄の部分のみ」熱硬化性樹脂のカラーリングを行うことができます。外科剪刀、眼科剪刀など多くの器具を管理する手術室や中央材料室で「診療科別」「術式セット別」などを色で識別することができ便利です。



### SERIES LINEUP

### 剪刀シリーズの区分・選び方

### HOW TO SELECT

#### 一般外科 / 微小外科

SURGERY


- 一般外科用(全 16 種類)、マイクロサージェリー用(全 6 種類)のラインナップがあります。
- マイクロサージェリー用は、直径 2mm 前後の血管の外膜や神経の切除、切断に使用します。また眼科医の方が眼部の細かい切開、切除に使用します。

#### 長さ・先端形状

LENGTH・TIP SHAPE

- 使用領域や先生の好みなどに応じて、使用する剪刀を選びます。
- 一般的に皮膚などの人体表面に近いところの部位には短い器具を使用し、腹部などの深い部位には長い器具を使用します。

#### 直型 / 曲型

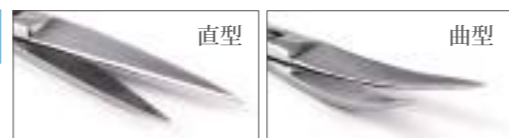

#### 鋭い / 丸い



LENGTH



10.5cm

TIP SHAPE

17cm



### 一般外科用剪刀

品名	全長	先端形状	タイプ	注文番号
メツエンバーム剪刀 TS-003	14.5cm	曲型	スーパーカット	TS-003
	16cm	曲型	スーパーカット	TS-004
アイリス剪刀 (眼科剪刀) TS-005	11.5cm	曲型	スーパーカット	TS-005
	11.5cm	直型	スタンダード	TS-012
	11.5cm	曲型	スタンダード	TS-013
形成剪刀 TS-006	13cm	曲型	スーパーカット	TS-006
	12cm	曲型	スタンダード	TS-010
	13cm	曲型	スタンダード	TS-011
デリケート剪刀 TS-007	11cm	曲両尖	スーパーカット	TS-007
C/C エクセル・形成剪刀キルナー TS-008	10.5cm	曲型	スーパーカット + 超硬	TS-008
形成剪刀キルナー TS-009	10.5cm	曲型	スーパーカット	TS-009
メーヨ剪刀 TS-015	17cm	曲型	スタンダード	TS-015
メーヨ・スティール剪刀 TS-016	17cm	曲型	スタンダード	TS-016
抜糸剪刀 TS-017	13cm	直型	スタンダード	TS-017
形成剥離剪刀 TS-018	11cm	曲型	スタンダード	TS-018
スティープン剪刀 TS-019	13cm	曲型	スタンダード	TS-019

### マイクロサージェリー用剪刀

品名	全長	先端形状	タイプ	注文番号
C/C マイクロ剪刀 TS-001	16cm	直型	平柄 / 超硬	TS-001
	16cm	曲型	平柄 / 超硬	TS-002
マイクロ剪刀 TS-014	12cm	曲型	丸柄 / スーパーカット + 超硬	TS-014
	14cm	曲型	丸柄 / スタンダード	TS-020
	10cm	曲型	平柄 / スタンダード	TS-021
マイクロ・パナス剪刀 TS-022	8cm	直型	平柄 / スタンダード	TS-022