




JMR株式会社

日本の匠の技術の世界へ
医療現場の声をカタチにします

医療現場の「こんな欲しい」にお応えします

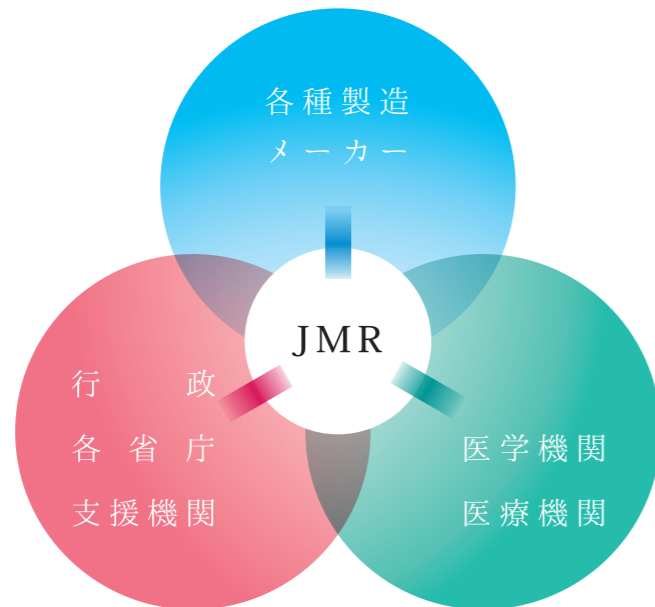

- 医療機器製造販売
- OEM
- 医療コンサルティング
- 医療ビジネスコーディネート

医学・医療機関や行政・各省庁との連携した開発だけでなく、技術を持った各種製造メーカーの医療分野参入への橋渡しとして「医学機関とメーカー」「行政・各省庁とメーカー」など、医療機器・福祉機器の開発に携わる企業や人を的確につなぎ、スムーズな流れをつくります。

医療における「こんな欲しい」を形にし、医師にも病气と闘う患者にもやさしい医療機器・福祉機器を提供していきます。

お問い合わせ

CONTACT

製品の詳細情報や、サンプル品の請求などがありましたら、弊社営業担当、または左記窓口までお気軽にお問い合わせください。

※製品の仕様などは予告なく変更する可能性があります

FAX 0256-77-8809


MAIL info@jmr-lab.com

URL <https://jmr-lab.co.jp> →



〒959-0511 新潟県新潟市西蒲区大原3061
TEL : 0256-77-8808 FAX : 0256-77-8809
第1種医療機器製造販売業許可：15B1X10003


JMR 株式会社

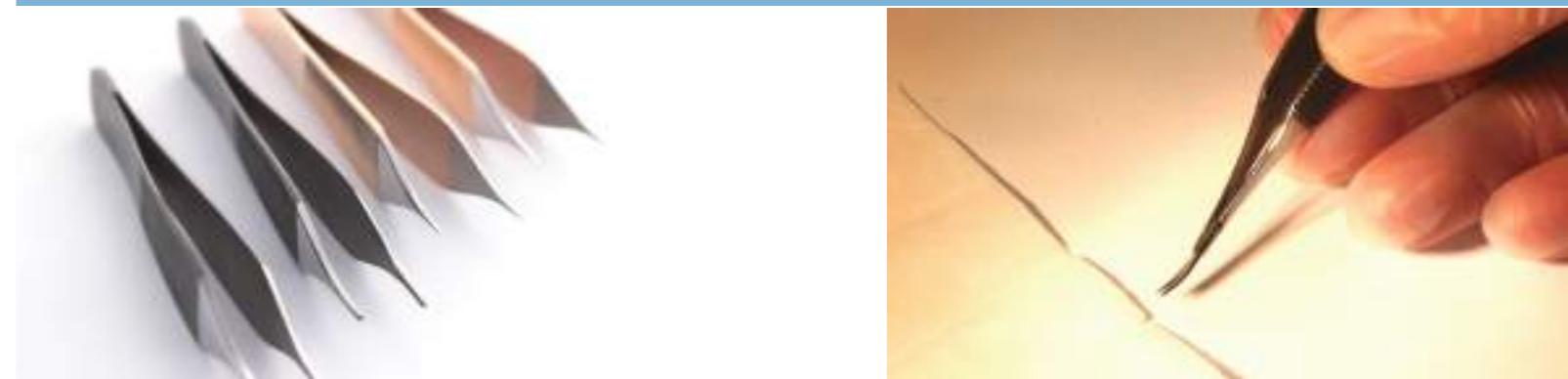

MEDICAL SOLUTION

Tissue Forceps

鑷子

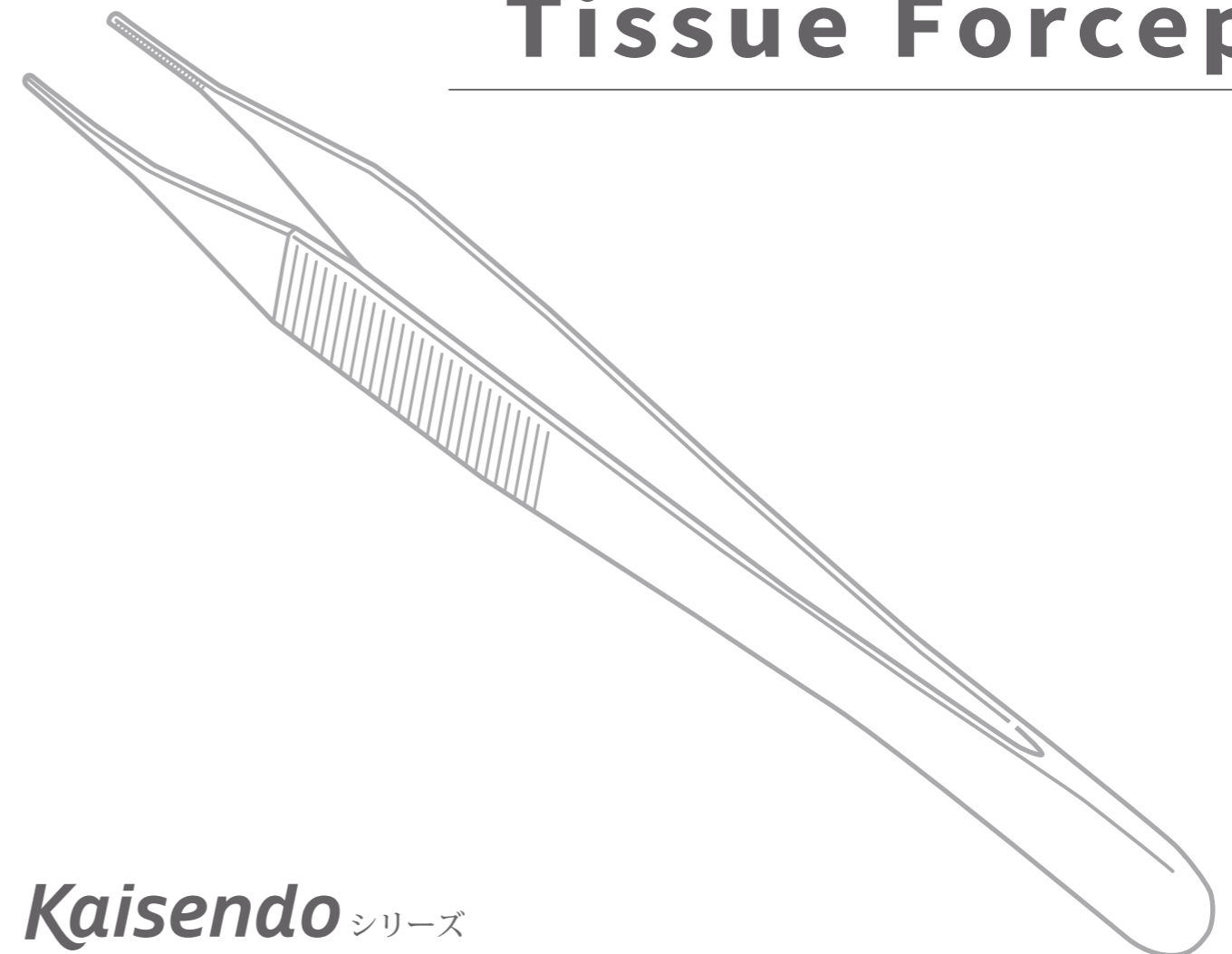

Kaisendo シリーズ

鑷子シリーズの特徴

SERIES LINEUP



ダイヤモンドダスト加工



ダイヤモンドダスト

Diamond dust PINK GOLD

先端にダイヤモンドダストを散りばめた表面加工を施しています。8-0 から 10-0 の縫合糸への使用に適します。



スタンダード

Standard J-GRAY

特殊加工のないスタンダードタイプ。

熱硬化性樹脂カラーリング (全 11 色)

各種鋼製小物のスタンダードタイプは「柄の部分のみ」熱硬化樹脂のカラーリングを行うことができます。外科用鑷子、アドソン鑷子など多くの器具を管理する手術室や中央材料室で「診療科別」「術式セット別」などを色で識別することができ便利です。



鑷子シリーズの区分・選び方

HOW TO SELECT

一般外科 / 微小外科

SURGERY

- 一般外科用 (全 27 種類)、マイクロサージェリー用 (全 6 種類) のラインナップがあります。
- マイクロサージェリー用は、直径 2mm 前後の血管の外膜や神経、縫合針 / 縫合糸の把持に使用します。また眼科医の方が眼部の組織、縫合針 / 縫合糸の把持に使用します。

有鉤 / 無鉤

HOOK

- 先端部に「鉤 (= かぎ状の突起)」がある鑷子が「有鉤」、ない鑷子が「無鉤」です。鉤の有無により把みややすさなどが異なるため、用途に合わせ使い分けれます。



有鉤

主に組織を把持する際に使用します。突起を利用し、滑らずに組織を把持します。



無鉤

突起部分がないスタンダードタイプ。主に縫合針や縫合糸、組織の把持に使用します。

PF (プラットフォーム)

PLATFORM



- 先端に PF (プラットフォーム) が付いた鑷子は、通常の鑷子より把持力がアップします。
- TP-019、TP-020、TP-024、TP-025 の 4 種が PH 付です。

PF (プラットフォーム) ※写真は TP-020

一般外科用鑷子

| | 品名 | 全長 | 有鉤 | 特徴 | 注文番号 |
|---|-------------------|--------|---|-----------|-----------|
|  TP-001 | マッカンドーピンセット | 15.5cm | — | — | TP-001 |
| | | | ○ | — | TP-002 |
|  TP-003 | アドソンピンセット | 12cm | — | — | TP-003 |
| | | | ○ | — | TP-004 |
|  TP-005 | | 15cm | — | — | TP-005 |
| | | | ○ | — | TP-006 |
|  TP-007 | アドソンマイクロピンセット | 12cm | — | — | TP-007 |
| | | | ○ | — | TP-008 |
|  TP-009 | 形成異物ピンセット | 13cm | — | — | TP-009 |
| | コークピンセット | 15.5cm | — | — | TP-010 |
|  TP-011 | ジェラルドピンセット | 17cm | ○ | 直型 | TP-011 |
| | | | ○ | 曲型 | TP-012 |
|  TP-018 | 形成デリケートピンセット | 11.5cm | — | — | TP-017 |
| | | | ○ | — | TP-018 |
|  TP-019 | 形成スーパーデリケートピンセット | 11.5cm | — | PF 付 | TP-019 |
| | | | ○ | PF 付 | TP-020 |
|  TP-021 | D/D マイクロアドソンピンセット | 12cm | — | 先端φ0.2mm | TP-021 |
| | | | — | 先端φ0.1mm | TP-022 |
|  TP-023 | | 15cm | — | 先端φ0.3mm | TP-023 |
| | | | <div style="background-color: #e91e63; color: white; padding: 2px;">ダイヤモンドダスト</div> | — | PF 付 |
|  TP-024 | D/D マイクロピンセット | 16cm | — | PF 付 | TP-024 |
| | | | ○ | PF 付 | TP-025 |
|  TP-026 | | 18.5cm | — | ルーツェ型 | TP-026 |
| | | | <div style="background-color: #e91e63; color: white; padding: 2px;">ダイヤモンドダスト</div> | — | 先端幅 3.5mm |
|  TP-027 | 鋭匙ピンセット | 13cm | — | 先端幅 3.5mm | TP-027 |
| | コーク型ピンセット | 15.5cm | — | 先細 | TP-028 |
|  TP-028 | | 15.5cm | — | 先太 | TP-029 |
| | | | <div style="background-color: #e91e63; color: white; padding: 2px;">ダイヤモンドダスト</div> | — | 先端フック |
|  TP-030 | アドソンフックピンセット | 12.5cm | — | 先端フック | TP-030 |
| | フックピンセット | 12.5cm | — | 先端フック | TP-031 |

マイクロサージェリー用鑷子

※マイクロサージェリー用鑷子は、全て無鉤

| | | | | |
|---|---------|--------|---------------------------------------|--|
|  TP-015 | 精密ピンセット | 11cm | No.4 : TP-013 / No.5 : TP-014 | |
| | | 10.5cm | 先端φ0.2mm : TP-015 / 先端φ0.3mm : TP-016 | |
|  TP-032 | マイクロ鑷子 | 11cm | 先端φ0.3mm・直型 | |
| | | | 先端φ0.3mm・曲型 45° | |