

EF-01

EndoFlower エンドフラワー

自然開口向け 単回使用内視鏡用非能動処置具


EndoFlower = 異物除去を目的とした内視鏡先端アタッチメントです。

内視鏡的異物除去術に於いて、特に生理的狭窄部を通過する際に異物を覆う事で異物の鋭利な部分と消化管の接触を防止する働きがあります。

特徴

- ・ 異物除去を目的として作られています
- ・ 従来の観察用先端アタッチメントよりもサイズが大きく異物を十分にカバーできます
- ・ サイズは大きくても挿入時にはフラップが畳まれ、挿入抵抗を小さくできます
- ・ 自然状態ではフラップは内視鏡に垂直に展開し、観察時に視界を遮りにくいです

製品

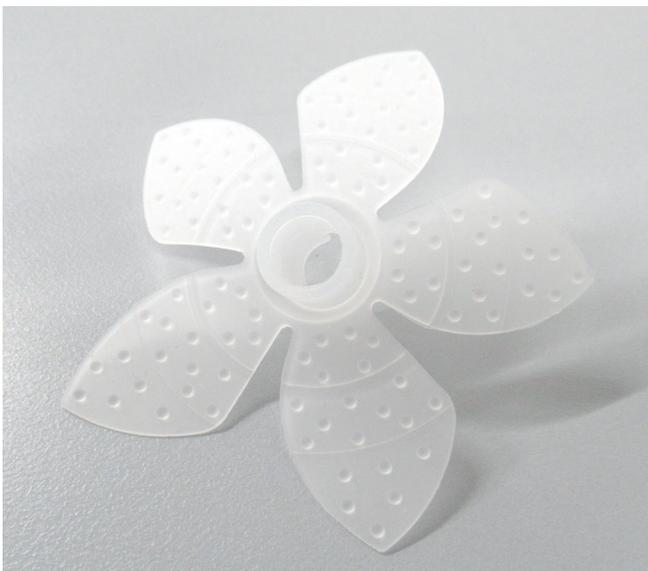

製品写真




内視鏡装着状態の写真

※この製品は、新潟大学大学院医歯学総合研究科消化器内科分野との共同開発です



構造

取付部を内視鏡の先端に装着して使用する。

材質：シリコーンゴム

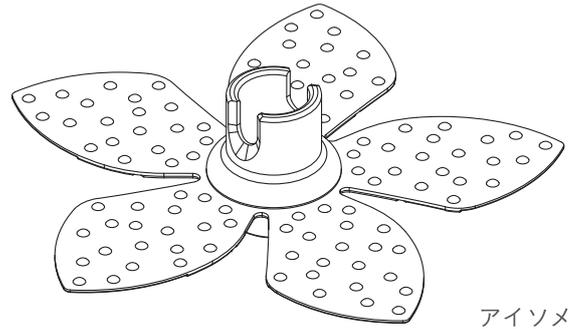


アイソメ図

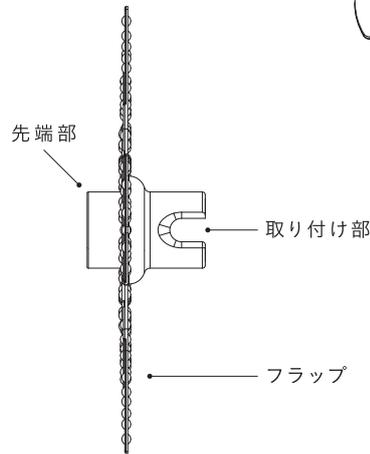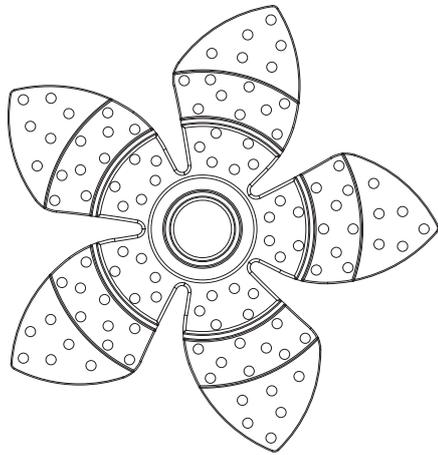


項目	諸元
外径	φ80mm
全長	20mm
内径	φ9.8mm
滅菌の有無	滅菌済み(EOG)

フラップの動き

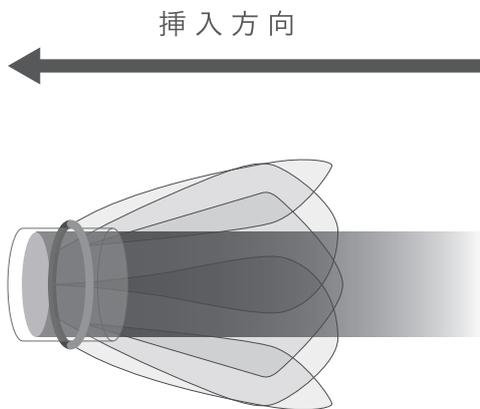

挿入時

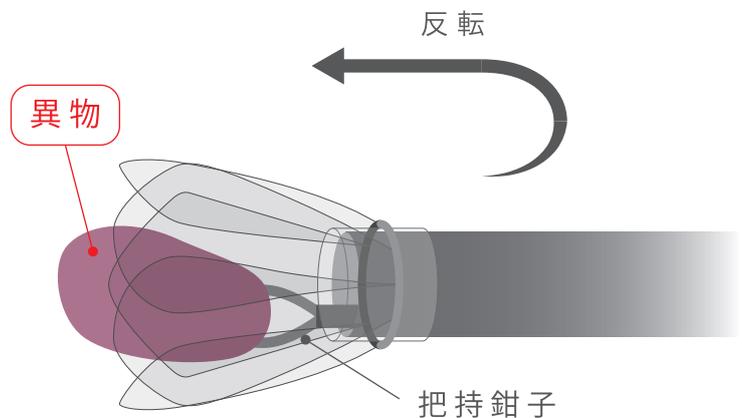

回収時

問い合わせ先

製造販売元



JMR株式会社

〒959-0511 新潟県新潟市西蒲区大原3061
TEL: 0256-77-8808 FAX: 0256-77-8809
第1種医療機器製造販売業許可番号: 15B1X10003
URL: <https://jmr-lab.co.jp/>

製造元

 **サンアロー株式会社**

(本社)
〒104-0032 東京都中央区八丁堀4-10-4
TEL: 03-3552-5981(代表) FAX: 03-3552-5989(代表)
URL: <http://www.sunarrow.co.jp>
(新潟工場)
〒954-0076 新潟県見附市新幸町5-1
医療機器製造業登録番号: 15BZ200054