


超音波ハンドピース用チップ

白内障の超音波乳化吸引術の際、超音波ハンドピースに取り付けて使用する吸引チップです。


独自の技術

ソリューションタイプ

スパイラル加工
(特許取得済)

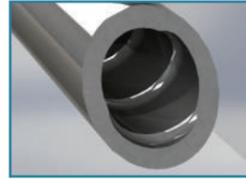

ローズタイプ

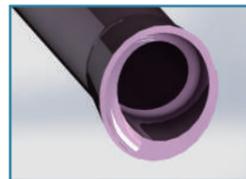

○「チップ先端の内部に渦巻状の段を加工」
することで核を内部で破砕し詰まりを無くしています。

○渦巻状の段加工が吸引管内部に渦巻状の流体を発生させ安定した吸引が行えます。



Mail: info@jmr-lab.com

第一種医療機器製造販売業 許可番号：15B1X10003
医療機器製造業 登録番号：15BZ200055
高度管理医療機器等販売業 許可番号：新市第1042号
医療機器修理業 許可番号：15BS200138

〒959-0511
新潟県新潟市西蒲区大原 3061
TEL: 0256-77-8808 FAX: 0256-77-8809

医療用吸引器 一般医療機器

再使用可能な汎用吸引チップ

Solution Tip

Spiral Water Flow

AMO サイズ



Japan Medical Research

ソリューションチップ ストレートタイプ (1箱4本入)

Cat.No. : ST01-S
Material : チタン合金

Spec
全 長 : 24.3mm
(接続時先端長 21.0mm)
管 外 径 : φ0.7mm
管 内 径 : φ0.5mm
先 端 内 径 : φ0.8mm
先 端 外 径 : φ1.0mm
チップ先端角 : 30°
リ ュ ー ス : 10 回



ソリューションチップ ターボゼロタイプ (1箱4本入)

Cat.No. : ST03-Z
Material : チタン合金

Spec
全 長 : 24.3mm
(接続時先端長 21.0mm)
管 外 径 : φ0.7mm
管 内 径 : φ0.5mm
先 端 内 径 : φ0.8mm
先 端 外 径 : φ0.9mm
チップ先端角 : 0°
リ ュ ー ス : 20 回



ソリューションチップ ローズ 21G ストレートタイプ (1箱4本入)

Cat.No. : ST21-S
Material : チタン合金

Spec
全 長 : 24.3mm
(接続時先端長 21.0mm)
管 外 径 : φ0.73mm
管 内 径 : φ0.55mm
先 端 内 径 : φ0.83mm
先 端 外 径 : φ0.9mm
チップ先端角 : 27.5°
リ ュ ー ス : 20 回



ソリューションチップ ベントタイプ (1箱4本入)

Cat.No. : ST01-B
Material : チタン合金

Spec
全 長 : 24.3mm
(接続時先端長 21.0mm)
管 外 径 : φ0.7mm
管 内 径 : φ0.5mm
先 端 内 径 : φ0.8mm
先 端 外 径 : φ1.0mm
チップ先端角 : 30°
曲 げ 角 : 15°
曲 げ 位 置 : 先端から 3mm
リ ュ ー ス : 10 回



ソリューションチップ ターボ逆ベントタイプ (1箱4本入)

Cat.No. : ST03-G
Material : チタン合金

Spec
全 長 : 24.3mm
(接続時先端長 21.0mm)
管 外 径 : φ0.7mm
管 内 径 : φ0.5mm
先 端 内 径 : φ0.8mm
先 端 外 径 : φ0.9mm
チップ先端角 : 27.5°
曲 げ 角 : 10°
曲 げ 位 置 : 先端から 4.5mm
リ ュ ー ス : 20 回



ソリューションチップ ローズ 21G ベントタイプ (1箱4本入)

Cat.No. : ST21-B
Material : チタン合金

Spec
全 長 : 24.3mm
(接続時先端長 21.0mm)
管 外 径 : φ0.73mm
管 内 径 : φ0.55mm
先 端 内 径 : φ0.83mm
先 端 外 径 : φ0.9mm
チップ先端角 : 27.5°
曲 げ 角 : 10°
曲 げ 位 置 : 先端から 4.5mm
リ ュ ー ス : 20 回



ソリューションチップ ターボストレートタイプ (1箱4本入)

Cat.No. : ST03-S
Material : チタン合金

Spec
全 長 : 24.3mm
(接続時先端長 21.0mm)
管 外 径 : φ0.7mm
管 内 径 : φ0.5mm
先 端 内 径 : φ0.8mm
先 端 外 径 : φ0.9mm
チップ先端角 : 27.5°
リ ュ ー ス : 20 回



ソリューションチップ ローズ 22G ストレートタイプ (1箱4本入)

Cat.No. : ST22-S
Material : チタン合金

Spec
全 長 : 24.3mm
(接続時先端長 21.0mm)
管 外 径 : φ0.71mm
管 内 径 : φ0.50mm
先 端 内 径 : φ0.83mm
先 端 外 径 : φ0.9mm
チップ先端角 : 27.5°
リ ュ ー ス : 20 回



ソリューションチップ ローズ 21G ゼロタイプ (1箱4本入)

Cat.No. : ST21-Z
Material : チタン合金

Spec
全 長 : 24.3mm
(接続時先端長 21.0mm)
管 外 径 : φ0.73mm
管 内 径 : φ0.55mm
先 端 内 径 : φ0.83mm
先 端 外 径 : φ0.9mm
チップ先端角 : 0°
リ ュ ー ス : 20 回



ソリューションチップ ターボベントタイプ (1箱4本入)

Cat.No. : ST03-B
Material : チタン合金

Spec
全 長 : 24.3mm
(接続時先端長 21.0mm)
管 外 径 : φ0.7mm
管 内 径 : φ0.5mm
先 端 内 径 : φ0.8mm
先 端 外 径 : φ0.9mm
チップ先端角 : 27.5°
曲 げ 角 : 10°
曲 げ 位 置 : 先端から 4.5mm
リ ュ ー ス : 20 回



ソリューションチップ ローズ 22G ベントタイプ (1箱4本入)

Cat.No. : ST22-B
Material : チタン合金

Spec
全 長 : 24.3mm
(接続時先端長 21.0mm)
管 外 径 : φ0.71mm
管 内 径 : φ0.50mm
先 端 内 径 : φ0.83mm
先 端 外 径 : φ0.9mm
チップ先端角 : 27.5°
曲 げ 角 : 10°
曲 げ 位 置 : 先端から 4.5mm
リ ュ ー ス : 20 回



チップレンチ (1箱1本入)

Cat.No. : TW01



チップ取付時は、
専用レンチをお使い下さい。